

SHIATSU VYHRIEVANÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

Model: HT-505

NÁVOD NA POUŽITIE



Vážený zákazník, ďakujem za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou tohto produktu. Dôkladne si prečítajte tieto pokyny na použitie a uchovajte si ich pre budúce použitie.

Zamýšľané použitie:

Masáž krku, ramien, chrbta, ale aj iných častí tela, ako sú stehná, holene, chodidlá, ruky...

Technické parametre:

Zdroj napájania: AC 230 V / DC 12 V / 2A sieťový adaptér alebo z 12 V autozásuvky Maximálna spotreba energie 24W Hmotnosť: 2,8 kg Dĺžka: 110 cm

Automatický časovač: približne 15 minút

Tento prístroj môžu používať iba deti vo veku od 8 rokov, osoby s obmedzenou pohyblivosťou, zníženými senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak je prítomná určená osoba, ktorá dohliada na správne a bezpečné používanie produktu a je si vedomá rizík spojených s jeho používaním.

Deti sa nesmú hrať ani manipulovať so spotrebičom bez dohľadu oprávnenej osoby. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy sa poraďte so svojim lekárom ohľadom používania tohto zariadenia.

Používanie spotrebiča opakovane s hodinovou prestávkou

Tehotné ženy nesmú zariadenie používať.

Nepoužívajte spotrebič, ak ste chorí. Ak trpíte srdcovým a cievny ochorením alebo iným ochorením, poraďte sa so svojim lekárom o používaní zariadenia.

Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie pri používaní zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.

Odpojte adaptér zo siete, keď spotrebič nie je v prevádzke.

Neroberte, neopravujte ani neupravujte spotrebič sami. Všetky opravy odporúčajte len špecializovanému servisnému centru.

Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré alebo vlhké ruky.

Nepoužívajte spotrebič, ak sú napájacie káble, adaptér alebo spotrebič akokoľvek poškodené.

Nepoužívajte spotrebič v miestnosti s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. - Nepoužívajte zložené, nepoužívajte pokrčené.

Nepichajte špendlíky do opasku.

Nepoužívajte spotrebič, keď je mokry.

FUNKCIA PRODUKTU (RIADENIE)

Panel tlačidiel

A - zapnutie/vypnutie

B - tlačidlo na zmenu fungovania masážnych hláv

C - intenzita masáže

D - ON/OFF na vyhrievanie

Funkcie:

- Mikropočítačové riadenie
- Dve masážne hlavy, každá so štyrmi výstupkami
- Možnosť zmeniť fungovanie masážnych hláv
- Možnosť meniť intenzitu masáže



HODNOTENIE ŠKÔD

Ak je problém s prevádzkou produktu, skontrolujte nasledujúce body, ktoré vám pomôžu chybu vyriešiť. Ak produkt stále nefunguje, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Potom kontaktujte servisné oddelenie.


Nikdy nerozoberajte produkt doma ani sa ho nesnažte opraviť sami. Ak tak urobíte, stratíte právo na záručnú dobu a predávajúci nebude zodpovedný za akékoľvek vzniknuté problémy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Ťažkosti	Možné riešenia/opatrenia
Produkt sa po spustení nezapne.	Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený do zásuvky. Skontrolujte, či je vaša zásuvka funkčná. Skontrolujte, či je konektor zariadenia správne pripojený k adaptéru alebo adaptéru do auta. Uistite sa, že tlačidlo masáže je správne stlačené.
Produkt sa zastaví uprostred masáže.	Skontrolujte, či napájací kábel nie je odpojený od konektora adaptéra alebo či je adaptér odpojený zo zásuvky. Skontrolujte, či tlačidlo napájania na ovládacom paneli nebolo stlačené omylom. Funkcia automatického 15-minútového časovača masáže mohla byť už spustená. Funkcia ochrany proti prehriatiu spotrebiča mohla byť aktivovaná. Vypnite hlavné napájanie a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, prestaňte produkt používať a kontaktujte servisné oddelenie.

ODPORÚČANÝ SPÔSOB VYUŽITIA KRKU


A RAMIEN NA HORNEJ ČASTI CHRBTY

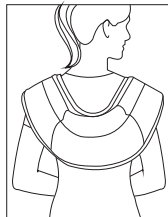

DOLNÁ ČASŤ CHRBTY ZADOK

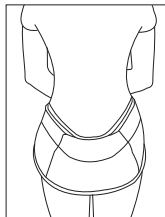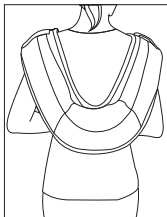

STEHNÁ

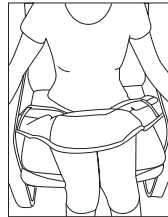

PREVÁDZKOVÉ
VYUŽITIE:

Zapojte napájaciu zásuvku zo sieťového adaptéra do zásuvky (alebo môžete použiť 12V adaptér do auta) a zapnite tlačidlo ZAP/VYPNUTIE. Presuňte masážnu jednotku do masážnej oblasti a uistite sa, že zariadenie je správne a pohodlne umiestnené na vašom tele.

Funkcie

Stlačte tlačidlo napájania a spotrebič sa zapne a začne fungovať. Počas masáže môžete aktivovať zmenu chôdze (pozri "CONTROL")

Poznámka!

Automatická funkcia vypnutia sa aktivuje približne po 15 minútach.

Dôležité oznámenia

- Nepoužívajte produkt, ak je obalová látka poškodená.
- Ak dodávate produkt cez autozásuvku, povolené napätie je 12 V. Pri použití v autách s 24 V hrozí riziko poškodenia produktu, ktoré nie je kryté zárukou.
- Do produktu nekladajte žiadny predmet ani horľavý materiál. Takýto spôsob môže spôsobiť skrat, poškodenie produktu alebo riziko požiaru.
- Počas masáže nie je potrebné vyvíjať príliš veľký tlak
- Počas masáže nezakrývajte produkt ničím iným. To by mohlo spôsobiť, že sa motor viac zahrieva a spôsobí poškodenie, alebo dokonca požiar.
- Produkt môže počas masáže vydávať zvuky.
- Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte s masážou.
- Tento produkt nie je určený na lekársku liečbu.
- Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, odporúčame vám najskôr sa poradiť so svojim lekárom ohľadom používania tohto produktu. Nepoužívajte tento produkt, ak sa necítite dobre. Produkt by tiež nemali používať tehotné ženy.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Používatelia musia byť riadne oboznámení s návodom na použitie. Pre bezpečnosť vašich detí si prečítajte všetky pokyny a varovania v tomto manuáli

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení Nevyhadzujte produkt s domácim odpadom na konci jeho životnosti alebo v čase, keď by oprava bola neekonomická. Aby bolo možné produkt správne zlikvidovať, odovzdajte ho určeným zberným miestam, kde bude prijatý bezplatne. Správnym likvidovaním pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť dôsledkom nesprávneho ukladania odpadu. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Ak je tento typ odpadu nesprávne likvidovaný v súlade s národnými predpismi, môžu byť uložené sankcie. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odnášajte ich na miesta na recykláciu batérií.

Služba

Ak po zakúpení produktu nájdete nejakú chybu, kontaktujte prosím servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na použitie. Sťažnosti sa neberú do úvahy, ak ste produkt upravili alebo ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka nie je krytá

- Prírodné opotrebovanie funkčných častí produktu v dôsledku jeho použitia
- pre servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou produktu (napr. čistenie, výmena dielov vystavených bežnému opotrebovaniu ...)
- Vady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nevhodné použitie a pod.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom produktu, nárazom, nárazom naň a podobne.
- škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodným príslušenstvom alebo nevhodným náradím a podobne.

V prípade reklamovaných produktov, ktoré neboli počas prepravy správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, riziko možného poškodenia nesie výlučne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za možné tlačové chyby. Ilustrácia a opis sa môžu líšiť od reality v závislosti od modelu.