

MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY S VYHRIEVANÍM AKTÍVNY PRE

Model : CF-5903

Návod na použitie

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto alebo akéhokoľvek iného elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia všeobecne platné pre prevádzku elektrických spotrebičov. Používajte ho len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí; je určený len na domáce použitie. Nie je určený na komerčné použitie. Prístroj nepoužívajte v kúpeľniach alebo v iných vlhkých prostrediach, v blízkosti krbov alebo v blízkosti iných zdrojov tepla.


Prístroj funguje s 230 V / 50 Hz sieťovou prípojkou. Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete. Prístroj nikdy nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel. Poškodený napájací kábel môže vymeniť len kvalifikovaný servisný personál.

Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, premiestňovanie, ťahanie, pretahovanie alebo zdvíhanie výrobku. Kábel netahajte cez ostré rohy a hrany ani okolo nich. Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky tak, že ju uchopíte a opatrne vytiahnete. Nikdy netahajte za samotný kábel, aby ste ho vytiahli zo zásuvky. Používajte iba originálny adaptér, ktorý je súčasťou dodávky. Zariadenie nie je detská hračka. Deti a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu zariadenie používať len pod dohľadom. Výrobok nepoužívajte v stoji, nesadajte si naň ani naň nekladte žiadne ťažké predmety, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Na hornú plochu neumiestňujte žiadne tekutiny. Ak sa počas používania vyskytne akýkoľvek nezvyčajný pocit, okamžite masáž prerušte.

a potom sa poraďte so svojím lekárom.

Upozornenie: Pri používaní masáže je potrebné dbať na to, aby ste sa vyhli riziku poškodenia pokožky.

POPIS ČASTÍ

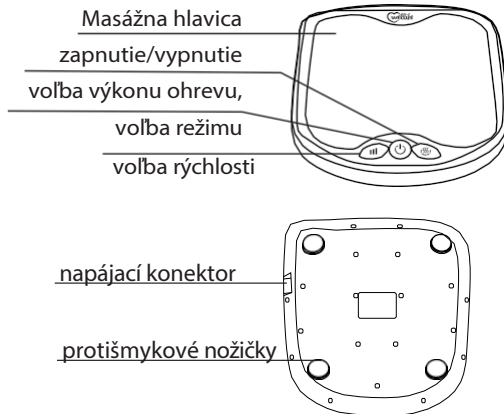

Funkcie zariadenia:

- valčeková masáž chodidiel s voliteľným výkonom ohrevu (2 úrovne).
- 3 nastavenia masáže (rýchlosť masáže)
- 3 rôzne masážne režimy

OVLÁDANIE ZARIADENIA

Zariadenie je vybavené tromi ovládacími tlačidlami s nasledujúcimi funkciami:

Tlačidlo zapnutia/vypnutia: stlačením raz zapnete, aktivuje sa automatický program, v ktorom sa mení rýchlosť a smer otáčania - svieti žltá kontrolka.

Stlačte 2x pre zmenu masážneho režimu - rozsvieti sa zelená kontrolka.

Stlačte 3x na zmenu smeru masážneho režimu - rozsvieti sa červená kontrolka.

4x stlačte na vypnutie zariadenia

Tlačidlo rýchlosti: 1x stlačte pre nízku rýchlosť - rozsvieti sa zelená kontrolka.

2x stlačte pre strednú rýchlosť - rozsvieti sa žltá kontrolka. 3x stlačte pre vysokú rýchlosť - rozsvieti sa červená kontrolka.

Tlačidlo ohrevu: po zapnutí prístroja sa aktivuje vyšší stupeň ohrevu.

Stlačením 1x prepnete na nižší stupeň ohrevu.

2x stlačením vypnete ohrev.

Tip: Na dosiahnutie najintenzívnejšieho účinku ohrevu ,

keď sa zariadenie používa naboso. .

Počas masáže môžete počuť cvakanie, čo je normálny stav spôsobený funkciou výrobku.

Poznámka: zariadenie je vybavené funkciou AUTO STOP, t. j. automaticky sa vypne po približne 15 minútach prevádzky. Opätovne ho možno spustiť stlačením ovládacieho tlačidla. ;

ÚDRŽBA

Povrch spotrebiča čistite suchou, mäkkou handričkou.

V prípade potreby môžete handričku mierne navlhčiť v mydlovom roztoku. Nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. Nikdy neponárajte celú jednotku do vody alebo iných kvapalín. Kryt je odnímateľný a možno ho prať pri teplote 30 °C. Nežehlite a ni nesušte v bubnovej sušičke. Nechajte sušiť len na v z d u c h u !

Základné technické parametre:

- Napájanie.
- Adaptér: vstup: 220 - 240 V, 50/60 Hz
výstup: 12V/2A
- Prikon: 24 W
- Funkcia AUTO STOP: po 15 min.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo v prípade, že by oprava bola neehospodárna. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate z miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženej používateľskej príručke. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v používateľskej príručke.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov p o d l i e h a j ú c i c h bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, zrážky atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko poškodenia výlučne vlastník. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Obrázky a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti o d modelu.